

PRODUKTINFORMATION
OTICON CONNECTLINE
STREAMER PRO 1.3A

Oticon | ConnectLine

Streameren er indgangsportalen til ConnectLine-systemet. ConnectLine gør det muligt for brugere af Oticon høreapparater at deltage aktivt i en række hverdagsituationer, som i bedste fald er vanskelige og i værste fald umulige at deltage i, selv med de bedste høreapparater. Systemet omfatter specielt udviklede løsninger til fjernsyn, fastnettelefon og en mikrofon. Streameren understøtter også Bluetooth, så høreapparaterne kan fungere som headset for mobiltelefoner osv.

Et fuldt integreret system

Med ConnectLine har brugeren kontrol over systemet, ikke omvendt. Avancerede funktioner, såsom AutoPriority og AutoConnect, sikrer for eksempel, at et telefonopkald kan høres og besvares, mens man ser fjernsyn.

Testet brugbarhed

Streameren er blevet udviklet og grundigt testet med høreapparatbrugere i tankerne¹.

Headset til musik

Ved hjælp af enten et kabel (inkluderet) eller trådløst (via Bluetooth) kan lyd sendes direkte og stabilt til begge høreapparater fra fx en mp3-afspiller.

Headset til mobiltelefoner

Streameren kan parres med de fleste mobiltelefoner² og dermed forvandle høreapparaterne til et kvalitetsheadset takket være Streamerens indbyggede mikrofon.

Telespole

Der er indbygget telespole til brugere med høreapparater uden telespole eller til brugere, som finder det mere bekvemt at bruge Streamerens telespole.

ConnectLine telefon-adapter

En løsning specielt udviklet til brug af fastnettelefon i hjemmet, som i realiteten forvandler Streameren og høreapparaterne til et trådløst headset.

ConnectLine tv-adapter

En løsning specielt udviklet til tv med lyd af høj kvalitet takket være den direkte streaming af lyden fra fjernsynet til høreapparaterne.

ConnectLine mikrofon

En lille, diskret clipsmikrofon, som forbedrer signal-støjforholdet betydeligt for høreapparatbrugeren i vanskelige og støjfyldte miljøer.

PC/VoIP - plug and play

Ved hjælp af det medfølgende kabel kan Streameren sluttet direkte til en computer og fungere som headset

Tilslutning af FM

Streameren har et stik til FM-modtagere. Læs mere på www.oticon.dk.

ConnectLine App til iPhone®, iPad®, iPod touch® og Android™-enheder

Med appen til iPhone®, iPad®, iPod touch® og Android™-enheder er det nemt og diskret at styre høreapparaterne og ConnectLine-systemet, og samtidig kan man brugertilpasse funktionerne i ConnectLine-systemet.

Fås gratis i App Store og i Google Play™.



Referencer:

1. "Usability test of Oticon ConnectLine Streamer v3 Prototype" skrevet af DialogDesign ("<http://www.DialogDesign.dk>" www.DialogDesign.dk), 15. juni 2011, 14. oktober 2011 og 7. december 2011.
2. Se venligst www.oticon.dk for en opdateret liste over kompatible telefoner.



People First

Med vores People First-løfte forpligter vi os til at forbedre menneskers muligheder for at kommunikere naturligt og deltage aktivt

www.oticon.dk





PRODUKTOVERSIGT

Oticon | ConnectLine

Inkluderet tilbehør

- Nakkestropper (lang og medium)³
- Strømadapter til opladning
- Beskyttelsescover i silikone
- Kabler til pc/lyd-interface

3. BEMÆRK! Halslyngen er en integreret del af systemet og bør altid benyttes for at opnå bedst mulig ydelse.

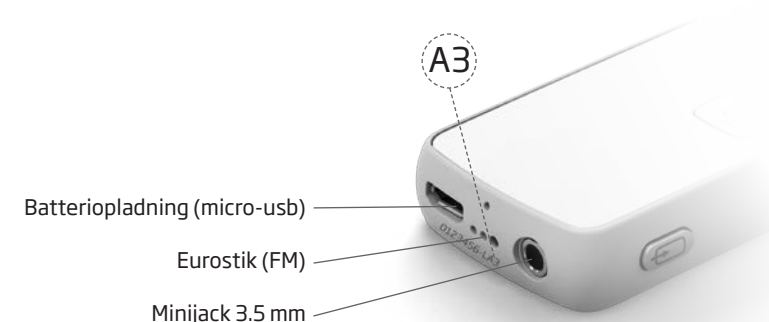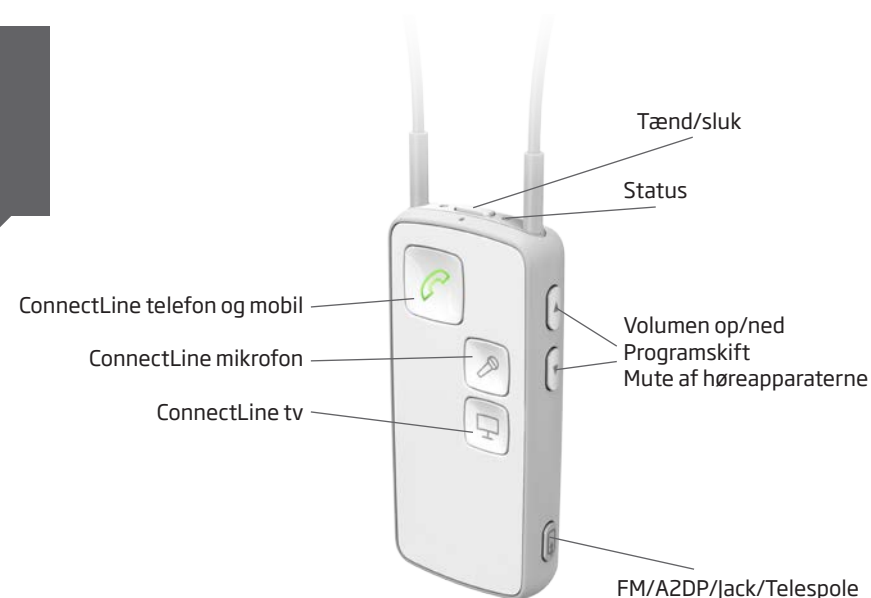

Teknisk information (firmware 1.3 build 3.3.X)	
Kompatibilitet	Alle trådløse (nEARlink slået til) Oticon høreapparater (fra Epoq, 2007). Genie 2013.1 eller nyere til streamerkonfiguration.
Dimensioner	13 x 40 x 85 mm; vægt 44 g (uden nakkestrop).
ConnectLine-systemfunktioner	AutoConnect (Streamereren sluttet automatisk til apparaterne, når den er inden for rækkevidde). AutoPriority (Streamereren prioriterer telefonopkald).
ConnectLine-systemfunktioner	ConnectLine mikrofon (kræver yderligere udstyr). ConnectLine telefonadapter 1.0 og 2.0 (kræver yderligere udstyr). ConnectLine tv-adapter (kræver yderligere udstyr).
Andre løsninger	Analogt input (3,5 mm minijack). Analogt output (3,5 mm minijack), til pc-headsetinterface (VoIP/Skype). Mobiltelefon-headset (Bluetooth håndfri-profil eller headset-profil). Streaming/trådløs musik (Bluetooth A2DP). FM-input (eurostik). Telespole (indbygget).
Fjernbetjening af HA	Volumen, programskift og mute ⁴ af høreapparaternes mikrofoner.
Batterilevetid ⁵	Typisk daglig brug 10 timer: 6 timers tv-streaming + 2 timers telefon/andet + 2 timer på standby (fra en kapacitet på 100% til 80%). 60 timer på standby (tændt, ingen streaming). Opladningstid 2 timer (fra en kapacitet på 80% til 100%). 6 måneder på fjernbetjening alene (fra en kapacitet på 100% til 80%). Forventet batterilevetid i alt 80% kapacitet tilbage efter 720 opladninger/genopladninger. Dette svarer til mindst to års typisk brug.
Inputfølsomhed for minijack	Max 2Vrms (analogt), impedans: 10 KΩ.
Lydkvalitet ⁶	Mono / 20 kHz samplingsfrekvens.
Båndbredde ⁶	80 Hz - 10 kHz (A2DP/line-in).
Parrede enheder	Op til 8 parrede enheder. Op til fem aktive trådløse enheder understøttet samtidig (2 telefoner, 1 tv-adapter, 1 mikrofon og 1 A2DP). Det er kun muligt at lytte til en kilde ad gangen.
Bluetooth compliance	Ver. 2.0 + EDR.
Understøttet Bluetooth-profil	Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2. Headset-profil (HSP) 1.2. Håndfri profil (HFP) 1.6 inkl. support for Wide Band Speech.
Trådløs rækkevidde ⁷	10 meter med Bluetooth klasse 2. Op til 30 meter med ConnectLine telefonadapter 2.0 og tv-adapter 2.0. Op til 15 meter med ConnectLine mikrofon.

EarStream-rækkevidde	0,5 meter nominelt. Nakkestrop bør benyttes for at opnå bedst mulig ydelse.
Signalrækkevidde	Signaler for indgående opkald og fjernbetjeningskommandoer op til 1 meter.
Streamingfrekvens	3.84 MHz.
Statusindikatorer	LED-lys på Streameren. Akustisk i høreapparaterne.
Emissioner	Maks. -15 dBμA/10 meter, opfylder alle relevante standarder.
Driftsfugtighed	< 85% relativ fugtighed.
Driftstemperatur	10-45 °C.
Opbevaringstemperatur	-20-70 °C.
Brugertilpasning af Streameren	Ved hjælp af Genie tilpasningssoftware (2013.1 eller nyere) kan en række funktioner konfigureres. Generelt Dedikeret Streamer - en Streamer kun til fjernsyn, telefon eller mikrofon. VK, programskift og mute af høreapparaterne, når der ikke streames. Mobiltelefoner Afvis opkald, genopkald til sidste nummer, stemmeopkald, valg af anden ringetone for mobil, alle knapper besvarer opkald. Andre funktioner Headset auto-start. Indgående A2DP-alarmer (ved tekst-/sms-beskeder).
Genie 2013.1 (eller nyere)	To Streamere kan sluttet til et par høreapparater. Bemærk venligst, at funktionalitet og finindstilling af ConnectLine-programmer vil være forskellige for forskellige Oticon høreapparater.
Reserve dele/tilbehør	Opladerholder i sort eller hvid. Bælteclips. Beskyttelsescovere. Nakkestropper i sort eller hvid (lang, medium & kort).
ConnectLine App - kompatibilitet	ConnectLine App til iPhone, iPad og iPod touch kører på iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPad Air, iPad mini med Retina-skærm, iPad mini, iPad (3. og 4. generation), iPad 2 og iPod touch (5. generation) og kræver Streamer Pro 1.2 App eller nyere. Søg efter iPhone apps i App Store, når du installerer ConnectLine App på en iPad. ConnectLine App til Android smartphones og tablets kræver en Streamer Pro med firmware 1.3 eller nyere. Læs mere om kompatibilitet på www.oticon.dk/app .

"Made for iPod", "Made for iPhone" og "Made for iPad" betyder, at elektronisk tilbehør er udviklet specielt til henholdsvis iPod, iPhone eller iPad, og at det er certificeret af udvikleren, så det overholder Apples standarder for ydeevne. Apple er ikke ansvarlig for betjeningen af denne enhed eller dens overensstemmelse med sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk venligst, at brugen af dette tilbehør med en iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse ydeevne.

Apple, Apple-logoet, iPhone, iPad og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. App Store er ligeledes et varemærke tilhørende Apple Inc. Android og Google Play er varemærker tilhørende Google Inc. Android-robotten reproduceres eller ændres baseret på værker, der er udviklet og delt af Google, og bruges i overensstemmelse med vilkårene beskrevet i Creative Commons Attribution 3.0-licens.

Referencer:

4. Oticon Alta eller nyere
5. Ved hjælp af nakkestrop og den medfølgende oplader
6. Den faktiske lydudsendelse afhænger af klientens høreapparater
7. Fri injekt mellem Streameren og andre enheder